

## PORRASKIIPIJÄ SA-3

Porraskiiپیجää on helppo käyttää ja soveltuu useimpien manuaalipyörätuolien alle. Porraskiiپیجän vahva moottori takaa turvallisen kuljetuksen portaissa painavammallekin asiakkaalle. Porraskiiپیجä soveltuu käytettäväksi sisä- tai ulkoportaissa ja yksityiskodeissa tai julkisissa rakennuksissa. Porraskiiپیجä on edullinen ja luotettava ratkaisu porrasongelmiin.

## Lisäpyöräkourut

Lisävarusteena myytävä lisäpyöräkourut mahdollistavat selkäosan kallistuksella, korkeussäädettävillä työntökahvoilla ja avustajajarruilla olevien pyörätuolien sekä 12" – 22" pyörillä varustettujen pyörätuolien kuljetuksen.



CAPACITY / TRAGLAST


160 kg

Helppo kuljettaa




Ajo-osa




Kiinnityskappale

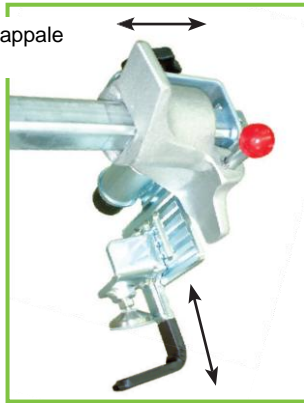

Lisäpyöräkourut

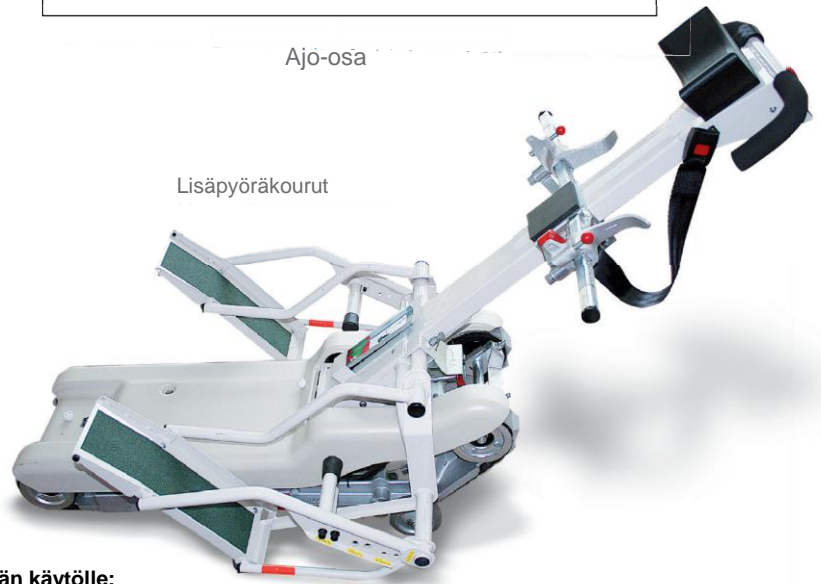

Erialaisten porrastasanteiden minimitulavaatimus porraskiiپیجän käyttöle:

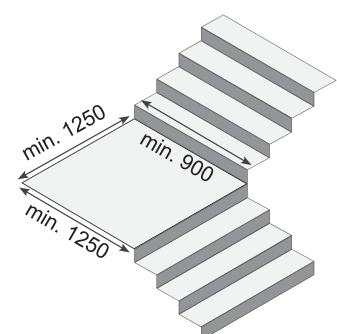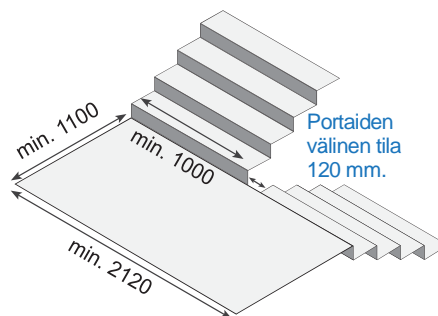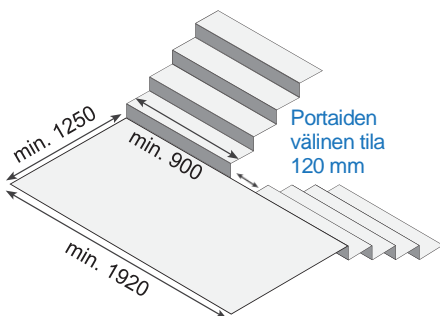

Maahantuonti, myynti ja huolto:

Apuväline Lähdemäki, Simakankatu 11, 30420 Forssa, P. 0400 – 483 258, sales@apuvälinelahde.fi, www.apuvälinelahde.fi



Selkeä  
käyttöpaneeli



Turvavyön  
magneettipidin

Muotoiltu suojakotelo antaa lisäturvallisuutta ja se on helposti poistettavissa.


Ladattavat akut ja erillinen latauslaite kuuluvat vakiovarustukseen.

Jälkiä jättämättömät, harmaat telakumat.

Porrasmittari

Latauspistoke

Lisävarustejatkokappaleet mahdollistavat levempien pyörätuo-lien kuljetuksen.

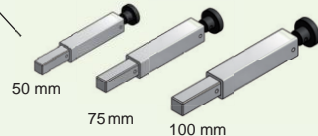

Lisäjatkokappaleet kiinnitysyksikköön



Lisäjatkokappaleet tukiputkiin



Aloitusasento.



Vedä pyörätuoli porraskiipijän päälle.



Kiinnitä porraskiipijä pyörätuoliin.



Kiinnitä turvavyö.



Vedä aisa alas "klik"-ääneen ja siirry portaisiin.

Tekniset tiedot			SA-3
Suurin sallittu kuorma	kg		160 (135 lisäpyöräkouruilla)
Ulkomitat	mm		1486 x 690 (lisäpyöräkouruilla 780) x 918
Paino	kg		65
Moottorin teho			210W / 30 min. nimellisteho
Akut			Huoltovapaat, suljetut liijyakut 2 x 6 V / 20 Ah / 20HR
Nopeus	Ylöspäin Alaspäin		6,5 m / min. 10 m / min.
Portaiden kulma			35°
Jarru			Elektromagneettinen jarru
Akun varausmittari			LED-näyttö
<b>Lisävarusteet</b>			
Automaattinen latauslaite	12 V / 2,5 A	Tilausno	333.252
Lasten pyörätuolien kuljetustaso		Tilausno	135.331
Lisäpyöräkourut		Tilausno	333.601

Maahantuonti, myynti ja huolto:

Apuväline Lähdemäki, Simakankatu 11, 30420 Forssa, P. 0400 – 483 258, sales@apuvälinelahde.fi, www.apuvälinelahde.fi