

# TOP FUTURA


Sairastuminen tai vammautuminen voivat joskus rajoittaa mahdollisuuksia selvitä elämän perusasioista, kuten esim. wc-käynnistä. Top Futura on avain vapaampaan elämään. Korkeaa elämänlaatua voi olla se, että pystyy itse käymään wc:ssä ilman, että on pyydetävä joku avustamaan. Top Futura on bidéistuin sinulle, jolla on rajoittunut liikuntakyky. Istuin pesee ja kuivaa sinut jokaisella wc-käynnillä - yksinkertaisesti ja ongelmitta. Top Futura koostuu kolmesta eri osasta: istuinrenkas, lämminilmapuhallin ja ohjauspaneeli.

Top Futuran istuinrenkas on ergonomisesti muotoiltu ja siinä on miellyttävä istua. Eri toimintoja ohjataan manuaalisesti, mutta niitä voidaan ohjata myös automatiikalla. Ohjauspaneelin termostaatti säätelee pesuveden lämpötilaa pitäen sen vakiona +37°C.

Top Futura ohjauspaneelit: 2 vaihtoehtoa

Futuraa käytetään eräänlaisella joystickilla, jolla säädetään sekä suihkun suunta (eteen/taakse/molemmat) että vedenpaine.

Joystick voidaan tilata suorana tai taivutettuna, kuten viereisessä kuvassa. Kuivaus tapahtuu painamalla pientä painiketta joystickin vieressä.

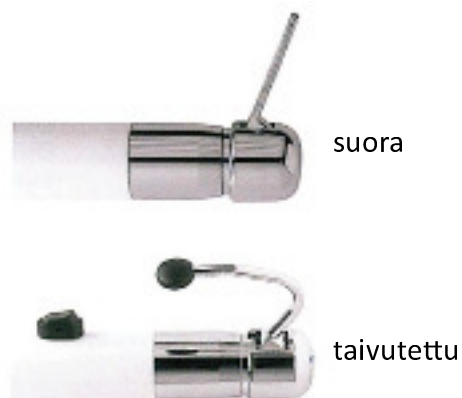

Max käyttäjän paino: 160 kg



[www.apuvalinelahde.fi](http://www.apuvalinelahde.fi)

Apuväline Lähdemäki Oy, Koskivuorenkatu 5, 30420 FORSSA, puh. (03) 4240 650

Päivitetty 2.2013





Istuinrenkaassa on kaksi ruostumattomasta teräksestä valmistettua suutinta - yksi edessä, toinen takana. Vesisuihkun suuntaa on mahdollista säädellä ohjauspaneelista tarpeen mukaan. Istuinrenkaan takaosassa on kotelo, joka säätelee lämminilmapuhalluksen suuntaa.

Istuinrenkaan korkeus:

35 mm, saatavissa korotuskappaleen avulla 70 mm tai 100 mm



Top Futura voidaan toimittaa myös automatiikalla, joka huolehtii sekä pesusta että kuivauksesta ennalta asetettujen aikojen mukaisesti. Automatiikkaa ohjataan pienellä painikkeella, joka voidaan asettaa haluttuun paikkaan ja sitä voidaan käyttää esim. kyynärpäällä, jalalla tai päällä painamalla.

Futuran hankinnassa on kiinnitettävä huomiota ohjauspaneelin, vesiliitännän ja lämminilmapuhaltimen sijoitteluun. Vesiliitäntä kiinnittyy istuinrenkaan toiselle sivulle ja lämminilmaletku toiselle sivulle. Lämminilmapuhallin sijoitetaan seinälle, samalle puolelle kuin istuimen ilmalitaintä.

Huom! Oikea ja vasen puoli ilmoitetaan siten kuin wc-istuimella istutaan.



#### Top Futura tilausnumerot:

Top Futura	versio 5: vesi oikealla ilma vasemmalla paneeli oikealla	73010
Top Futura	versio 6: vesi vasemmalla ilma oikealla paneeli oikealla	73020
Top Futura	versio 7: vesi vasemmalla ilma oikealla paneeli vasemmalla	73030
Top Futura	versio 8: vesi oikealla ilma vasemmalla paneeli vasemmalla	73040
Automatiikka	Futura	568